


Fresas endodónticas • Strumenti endodontici • Instrumentos endodônticos

180.15. ... 180.19. ... Gates

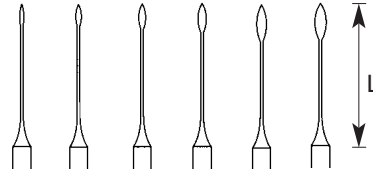


Codificación sobre el vástago/anillos • Codice del gambo/anelli				1	2	3	4	5	6
Codificação da haste/anéis				ø 1/100 mm					
Shank	ISO	REF							
RA L=15	330 204 679 336 ...	180.15. ...	6	050	070	090	110	130	150
Assortment				050	070	090	110	130	150
RA L=19	330 205 679 336 ...	180.19. ...	6	050	070	090	110	130	150
Assortment				050	070	090	110	130	150

opt. 450 - 800 rpm




183.15. ... 183.19. ... Peeso

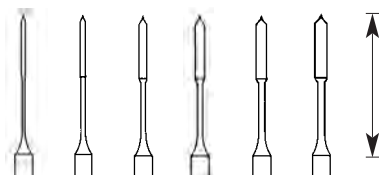

Codificación sobre el vástago/anillos • Codice del gambo/anelli				1	2	3	4	5	6
Codificação da haste/anéis				ø 1/100 mm					
Shank	ISO	REF							
RA L=15	330 204 682 336 ...	183.15. ...	6	070	090	110	130	150	170
Assortment				070	090	110	130	150	170
RA L=19	330 205 682 336 ...	183.19. ...	6	070	090	110	130	150	170
Assortment				070	090	110	130	150	170

opt. 800 - 1200 rpm

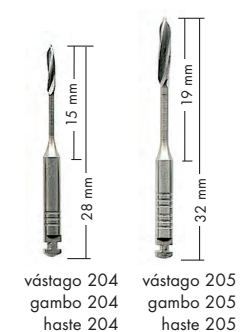

Aplicación • Applicazione degli strumenti endodontici • Possibilidades de aplicação



El diente antes del tratamiento endodóntico.
Il dente prima del trattamento endodontico.
O dente antes do tratamento endodôntico.



Utilizar una fresa de Gates para abrir la angostura fisiológica del conducto.
Il canale viene aperto con una fresa Gates.
Abrir a porção fisiológica, mais estreita do canal com uma broca de Gates.

Endodoncia • Endodonzia • Brocas de endodontia



802L (494)

Redondo, con cuello largo
Tonda, con collo lungo
Redonda, com colar longo



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	013	016	021
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0	10,0	10,0

Shank	ISO	REF	5
FG	806 314 494 524...	802L- ... M-FG	013 016 021

⌚ opt. 013 - 016 = 120.000 rpm, 021 = opt. 160.000 rpm

Bola de diamante con cuello diamantado para la apertura y el ensanchamiento de la cámara pulpar.

El largo cuello diamantado del instrumento simplifica la creación de una gran apertura para el tratamiento endodóntico.

La granulometría media favorece un trabajo rápido mientras que preserva el tejido duro del diente.

Fresa diamantata a palla con collo tagliante per l'apertura e l'allargamento della camera della polpa.

Il lungo collo diamantato dello strumento semplifica la realizzazione di un'apertura d'accesso per il trattamento della radice.

La granulometria media della diamantatura abbrevia il tempo di lavorazione senza danneggiare la sostanza dentale.




Broca redonda diamantada com pescoço adicional activo, para abertura e ampliação da câmara pulpar.

O pescoço deste instrumento é longo e diamantado, o que facilita uma abertura ampla para o tratamento endodôntico subsequente.

O grão de diamante de diâmetro médio garante um trabalho rápido poupando simultaneamente a substância dentária.

Clínica Dental • Studio Dentistico • Clínica Dentária

Endo Access Kit

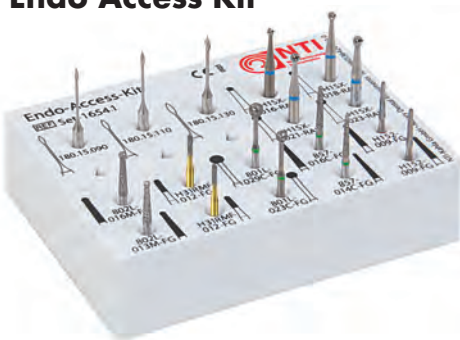

REF SET-1654.1   

Página / Pagina / Página 9.20 - 9.21




H152 (210)

Cónica, extra largo
Conica, extra lunga
Cónica, extra longa

Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	009
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	9,0

Shank	ISO	REF	3
FG	500 314 210 295...	H152 - ... -FG	009
FGL	500 315 210 295...	H152 - ... -FGL	009

⌚ opt. 120.000 rpm

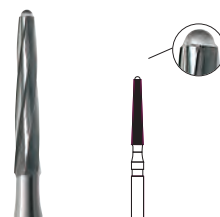

H1SNL Endo Müller Burs

H1SNL fresa Müller Endo

La fresa Müller para el tratamiento endodóntico de los conductos radiculares. Los diámetros pequeños permiten localizar, abrir y ensanchar los conductos radiculares, incluso en el caso de dientes anteriores delgados. El cuello largo y delgado facilita la localización segura de los canales sin obstruir la visión, especialmente bajo el microscopio endodóntico. La geometría de filos fue diseñada para obtener un alto rendimiento. Esto también facilita la eliminación de dentina endurecida.

Frese di Müller per endodoncia H1SNL

Frese di carburo di tungsteno per endodoncia

Frese di Müller a sfera per il trattamento endodóntico dei canali radicolari.

Il diametro ridotto permette di individuare, aprire e allargare i canali radicolari anche di denti frontali sottili.

Il collo più lungo e sottile consente di individuare i canali senza ostacolarne la visualizzazione, soprattutto al microscopio endodóntico.

La geometria di taglio è stata realizzata per garantire un rendimento particolarmente elevato, che facilita la rimozione anche della dentina sclerotica.

Broca Müller Endo H1SNL

Broca de carburo de tungsténio para endodontia

A broca esférica Müller para o tratamento endodóntico de canais radiculares.

O pequeno diâmetro permite encontrar, abrir e aumentar primeiro os dentes anteriores delicados dos canais radiculares.

O colar longo e delgado permite encontrar em segurança o canal sem obstruir a visibilidade, principalmente sob o microscópio endodóntico.

A geometria de corte foi concebida para um corte especialmente fácil. Isto desgasta a redução também da dentina endurecida.



H1SNL (001)

Redondo, cuello largo
Rotondo, collo lungo
Esférica, prescoço delgado

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	006	008	010	012
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	0,6	0,8	1,0	1,2

Shank ISO 5 REF

RAXL 500 206 001 003... H1SNL-... -RAXL 006 008 010 012

opt. 1.500 - 2.000 rpm



Fresa de carburo de tungsteno Endo • Frese di carburo di tungsteno per endodoncia Broca de carburo de tungsténio para endodontia



H1SEB (004)

Redondo, cuello largo
Rotondo, collo lungo
Esférica, prescoço delgado

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	004	006	008	010	012	014
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4

Shank ISO 5 REF

RAL 500 205 004 006... H1SEB-... -RAL 004 006 008 010 012 014

RAXL 500 206 004 006... H1SEB-... -RAXL 004 006 008 010 012 014

opt. 1.500 rpm

H269GK (219)


Endo

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	9,0

Shank ISO REF 3

FGXL 500 316 219 295... H269GK-... -FGXL 016

opt. 75.000 rpm

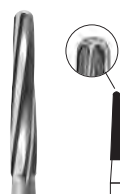

H560 (196)


Endo

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	008
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,0

Shank ISO REF 3

FGXXL 500 317 196 336... H560-... -FGXXL 008

opt. 100.000 rpm

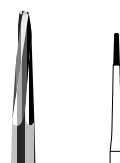

Instrumentos endodónticos de acero • Strumenti endodontici in acciaio • Instrumentos endodônticos de aço





178 ... 

Obturador radicular sin espiral de seguridad

Spingipasta senza spirale di sicurezza

Lentulo sem espiral de segurança

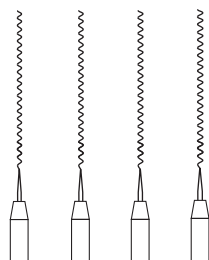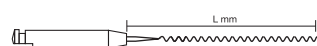

Tamaño / Grandezza / Tamanho ø 1/100 mm

025 030 035 040

Shank	ISO	REF					
RA L=21	340 204 671 458 ...	178.21.204. ...	4	025	030	035	040
(1 piece each) Assortment		178.21.204.SO	1	025	030	035	040
RA L=25	340 204 673 458 ...	178.25.204. ...	4	025	030	035	040
(1 piece each) Assortment		178.25.204.SO	1	025	030	035	040

opt. 800 rpm

Sin espiral de seguridad. Contraángulo con codificación verde.

Senza spirale di sicurezza. Contrangolo con codifica verde.

Sem espiral de segurança. Contra-ângulo com código cromático verde.




178S ... 

Obturador radicular con espiral de seguridad

Spingipasta con spirale di sicurezza

Lentulo com espiral de segurança.

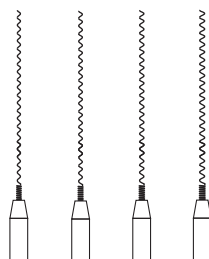

Tamaño / Grandezza / Tamanho ø 1/100 mm

025 030 035 040

Shank	ISO	REF					
RA L=21	340 204 672 458 ...	178S.21.204. ...	4	025	030	035	040
(1 piece each) Assortment		178S.21.204.SO	1	025	030	035	040
RA L=25	340 204 673 458 ...	178S.25.204. ...	4	025	030	035	040
(1 piece each) Assortment		178S.25.204.SO	1	025	030	035	040

opt. 800 rpm

Contraángulo con codificación verde.

Contrangolo con codifica verde.

Contra-ângulo com código cromático verde.

