


Discos diamantados • Dischi diamantati • Discos diamantados

CeraShape - borde no cortante • bordo non tagliente • aresta não cortante

Ultraflex
806 104 ...

344

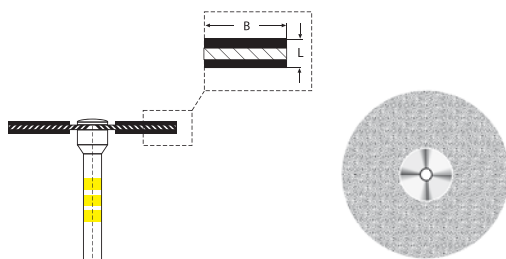

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,09

Shank ISO REF 1

HP 806.104. ... 344.504.220

opt. 25.000 rpm

El disco **CeraShape** se utiliza para alisar las superficies interdientales y preparar superficies. El **borde no cortante** evita la formación de esquinas filosas y fisuras. La elevada flexibilidad en combinación con el diamantado superfino hace posible la obtención de excelentes resultados en un tiempo mínimo.

*Il CeraShape è utilizzato per levigare gli spazi interdentali e le superfici rifinite. Grazie al **bordo non tagliente** si evita la formazione di spigoli e tacche. L'elevata flessibilità e la diamantatura extrafine permettono di ottenere risultati eccellenti in pochissimo tempo.*



806.104.344.504.220

Oliver Brixi




A CeraShape alisa espaços interdentários e superfícies já processadas. A aresta não cortante evita a formação de cantos e fissuras. A elevada flexibilidade em inteligente combinação com o grão diamantado ultrafino, permite excelentes resultados num curto espaço de tempo.

Ultraflex
806 104 ...

366



solamente para separa
solo per separare
somente para separar

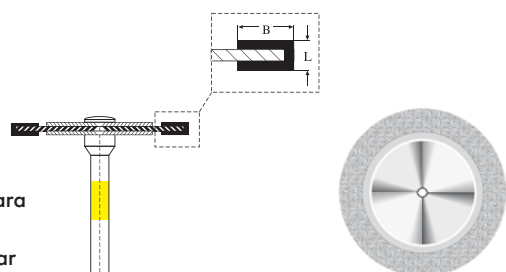

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	3,0
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,09

Shank ISO REF 1


HP 806.104. ... 366.504.220

opt. 25.000 rpm

367 Ultraflex es un disco diamantado ultradelgado para separar y conformar revestimientos estéticos, cerámicos y acrílicos, en el área anterior y posterior

367 Ultraflex è un disco diamantato ultra sottile, per la separazione e la rifinitura di ricoperture estetiche di ceramica e di resina dei denti frontali e posteriori.

367 Ultraflex um disco muito fino, indicado para separar e contornar revestimentos estéticos a cerâmica e resina, tanto em dentes anteriores como em posteriores.

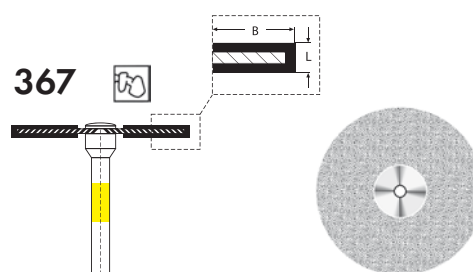

ø 1/10 mm	220
B mm	completo-piena-completo
L mm	0,09

HP 806.104. ... 367.504.220



806.104.367.504.220




■ Anillo amarillo/Anello giallo/Anél amarelo	Superfina/Superfine/Superfino	30 µm	ISO No. 504
■ Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 µm	ISO No. 514
■ Anillo azul/Anello blu/Anél azul	Estándar/Standard/Médio	100 µm	ISO No. 524

Discos diamantados • Dischi diamantati • Discos diamantados

Laboratorio • Laboratorio • Laboratório

Superflex
806 104 ...

■ 350

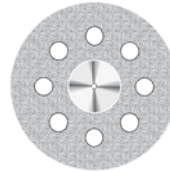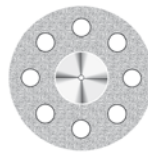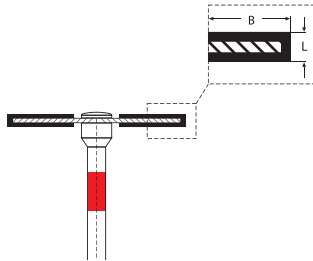

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	190	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,15	0,15




Shank REF 1

HP **806.104. ...** ■ **350.514.190** ■ **350.514.220**

ø 190 ↺ opt. 30.000 rpm • ø 220 ↺ opt. 25.000 rpm

Superflex
806 104 ...

■ 350

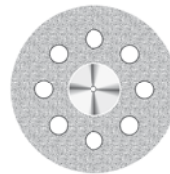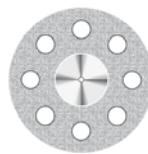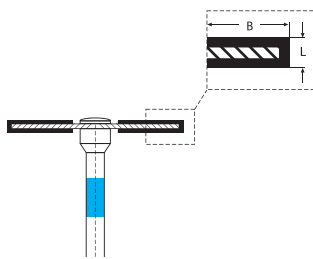

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	190	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,25	0,25


Shank REF 1

HP **806.104. ...** ■ **350.524.190** ■ **350.524.220**

ø 190 ↺ opt. 30.000 rpm • ø 220 ↺ opt. 25.000 rpm

Superflex
160.2

■ Brix Disc

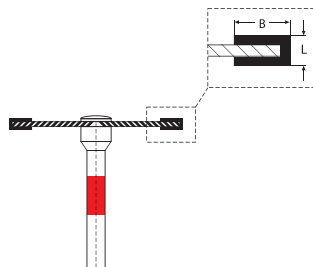


Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	160
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	3,00
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,15

Shank REF 1

HP **160.2-017-HP**

↺ opt. 30.000 rpm

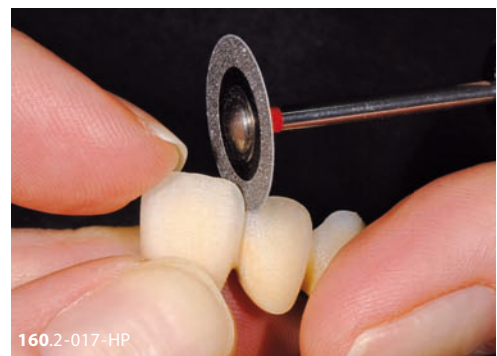

160.2-017-HP

La flexibilidad del disco permite el contorno perfecto a partir de cualquier ángulo.

La flessibilità del disco permette di eseguire una contornatura mirata da tutte le angolazioni.



A flexibilidade do disco permite o contorno perfeito a partir de qualquer ângulo.

■ Anillo amarillo/Anello giallo/Anél amarelo	Superfina/Superfine/Superfino	30 µm	ISO No. 504
■ Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 µm	ISO No. 514
■ Anillo azul/Anello blu/Anél azul	Estándar/Standard/Médio	100 µm	ISO No. 524

Discos diamantados • Dischi diamantati • Discos diamantados

Superflex
806 104 ...

351

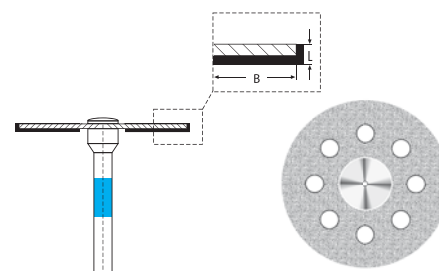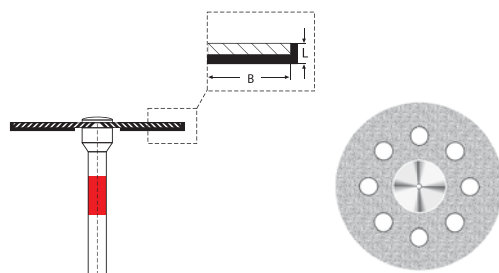

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,10

ø 1/10 mm	220
B mm	completo-piena-completo
L mm	0,15

Shank ISO REF 1

HP 806.104. ...



351.514.220

351.524.220

opt. 25.000 rpm

Superflex
806 104 ...

352

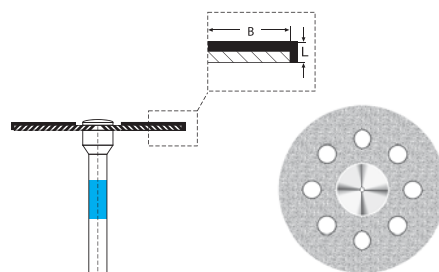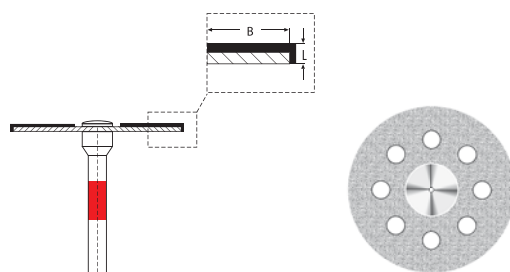

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,10

ø 1/10 mm	220
B mm	completo-piena-completo
L mm	0,15

Shank ISO REF 1

HP 806.104. ...




352.514.220

352.524.220

opt. 25.000 rpm

Superflex
806 104 ...

353

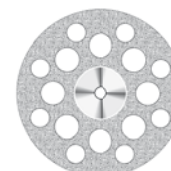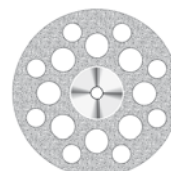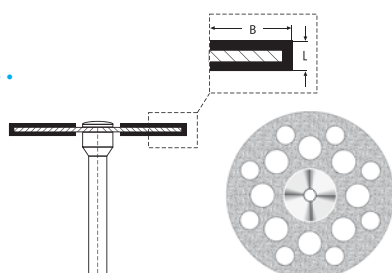

806.104.353.514.220

Tamaño/Grandezza/Tamanho	220	220	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	completo-piena-completo	completo-piena-completo	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	0,12	0,15	0,25

Shank ISO REF 1

HP 806.104. ...

353.504.220

353.514.220

353.524.220



opt. 25.000 rpm

Anillo amarillo/Anello giallo/Anél amarelo	Superfina/Superfine/Superfino	30 µm	ISO No. 504
Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 µm	ISO No. 514
Anillo azul/Anello blu/Anél azul	Estándar/Standard/Médio	100 µm	ISO No. 524

Discos diamantados • Dischi diamantati • Discos diamantados

Superflex
806 104 ...

355

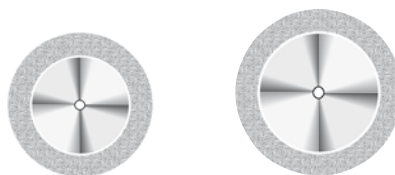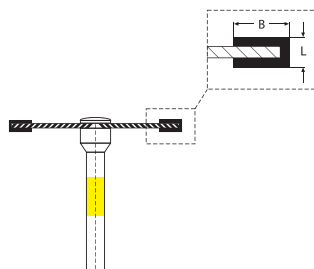

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	190	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	3,00	3,00
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,12	0,12


Shank   

HP **806.104. ...** ■ **355.504.190** ■ **355.504.220**

ø 190 ↺ opt. 30.000 rpm • ø 220 ↺ opt. 25.000 rpm

Superflex
806 104 ...

355

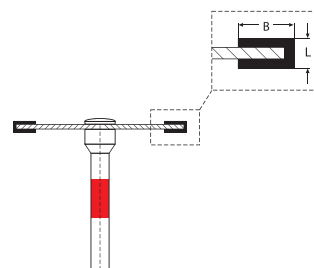

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	160	190	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	3,00	3,00	3,00
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,15	0,15	0,15


Shank   

HP **806.104. ...** ■ **355.514.160** ■ **355.514.190** ■ **355.514.220**

ø 160/ø 190 ↺ opt. 30.000 rpm • ø 220 ↺ opt. 25.000 rpm

Superflex
806 104 ...


355

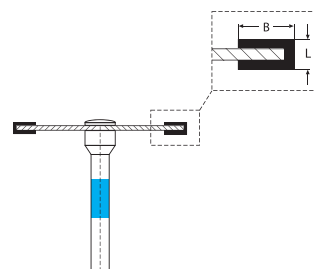

806.104.355.524.220



806.104.355.514.160

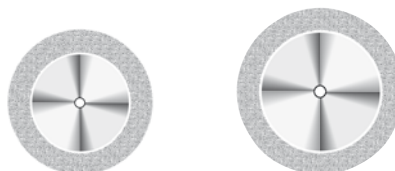

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	190	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	3,00	3,00
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,25	0,25

Shank   

HP **806.104. ...** ■ **355.524.190** ■ **355.524.220**


ø 190 ↺ opt. 30.000 rpm • ø 220 ↺ opt. 25.000 rpm

■ Anillo amarillo/Anello giallo/Anél amarelo	Superfina/Superfine/Superfino	30 µm	ISO No. 504
■ Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 µm	ISO No. 514
■ Anillo azul/Anello blu/Anél azul	Estándar/Standard/Médio	100 µm	ISO No. 524

Discos diamantados • Dischi diamantati • Discos diamantados

Superflex
806 104 ...

■ 356

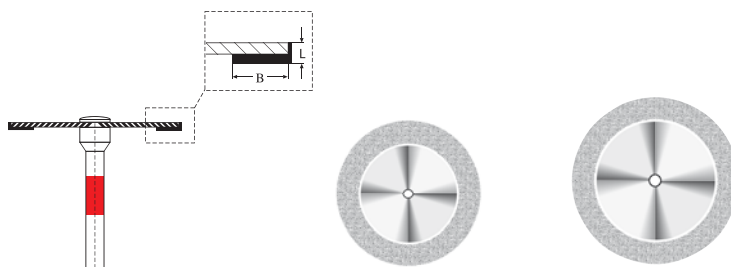

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	190	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	3,00	3,00
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,10	0,10


Shank ISO REF 1

HP 806.104. ... ■ 356.514.190 ■ 356.514.220

ø 190 ↻ opt. 30.000 rpm • ø 220 ↻ opt. 25.000 rpm

Superflex
806 104 ...

■ 357

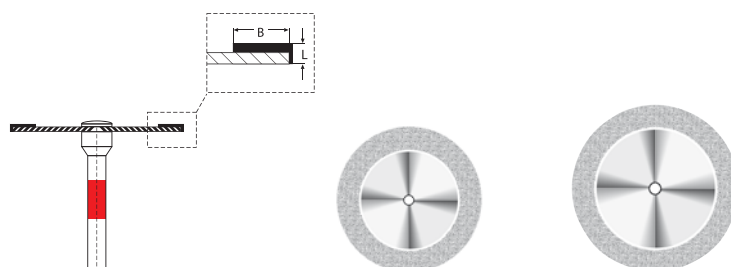

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	190	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	3,00	3,00
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,10	0,10


Shank ISO REF 1

HP 806.104. ... ■ 357.514.190 ■ 357.514.220

ø 190 ↻ opt. 30.000 rpm • ø 220 ↻ opt. 25.000 rpm

Superflex
806 104 ...

■ 358

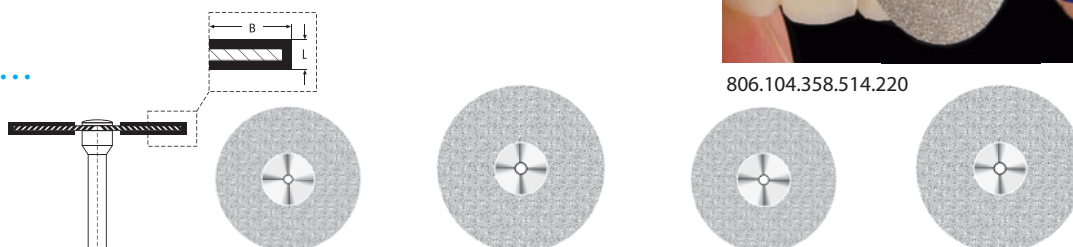

806.104.358.514.220

Tamaño/Grandezza/Tamanho	190	220	190	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	completo-piena-completo	completo-piena-completo	completo-piena-completo	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	0,15	0,15	0,25	0,25

Shank ISO REF 1

HP 806.104. ... ■ 358.514.190 ■ 358.514.220 ■ 358.524.190 ■ 358.524.220

ø 190 ↻ opt. 30.000 rpm • ø 220 ↻ opt. 25.000 rpm


■ Anillo amarillo/Anello giallo/Anél amarelo	Superfina/Superfine/Superfino	30 µm	ISO No. 504
■ Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 µm	ISO No. 514
■ Anillo azul/Anello blu/Anél azul	Estándar/Standard/Médio	100 µm	ISO No. 524

Discos diamantados • Dischi diamantati • Discos diamantados

doble lado • bilaterale • duas faces

Superflex
806 104 ...

■ 327

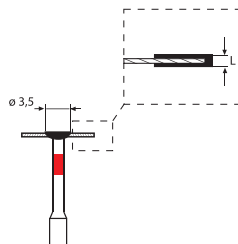


Tamaño/Grandezza/Tamanho	Ø 1/10 mm	080	100
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Largura mm	L mm	0,13	0,13

Shank   

HP **806.104. ...** ■ **327.514.080** ■ **327.514.100**


⌚ opt. 30.000 rpm

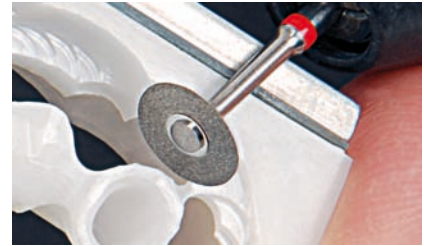

806.104.327.514.080

Superflex
806 104 ...

■ 361

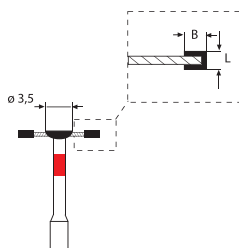

Tamaño/Grandezza/Tamanho	Ø 1/10 mm	080	100
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	1,0	1,0
Largo/Spessore/ Largura mm	L mm	0,13	0,13

Shank   

HP **806.104. ...** ■ **361.514.080** ■ **361.514.100**

⌚ opt. 30.000 rpm




806.104.361.514.080

un lado • unilaterale • uma face

Superflex
806 104 ...

■ 363

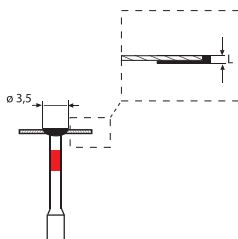

Tamaño/Grandezza/Tamanho	Ø 1/10 mm	100
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,08

Shank   

HP **806.104. ...** ■ **363.514.100**


⌚ opt. 30.000 rpm

■ Anillo amarillo/Anello giallo/Anél amarelo	Superfina/Superfine/Superfino	30 µm	ISO No. 504
■ Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 µm	ISO No. 514
■ Anillo azul/Anello blu/Anél azul	Estándar/Standard/Médio	100 µm	ISO No. 524

Discos diamantados • Dischi diamantati • Discos diamantados

Superflex
806 104 ...

■ 393

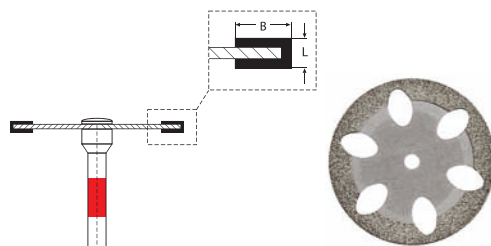

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	3,00
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,15

Shank  REF  1


HP 806.104. ...

■ 393.514.220


■ 396.514.220

opt. 25.000 rpm

■ 396

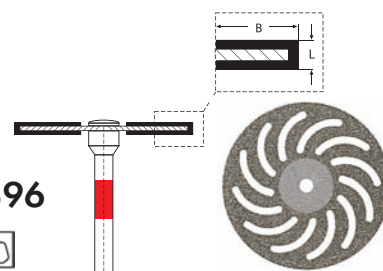


Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,15

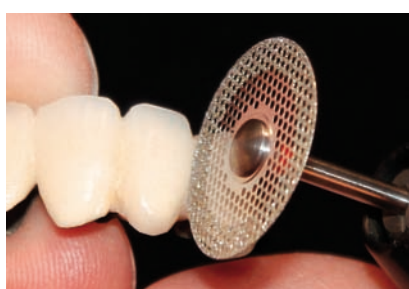

Superflex
806 104 ...

■ 400

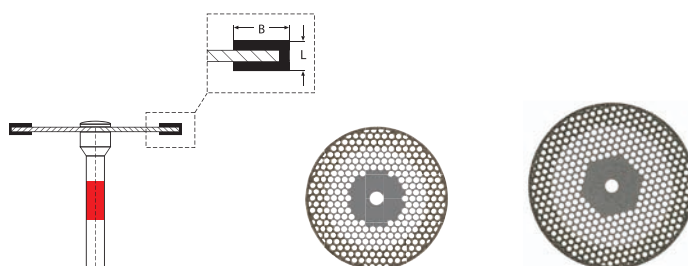

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	190	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	3,00	3,00
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,15	0,15

Shank  REF  1

HP 806.104. ...

■ 400.514.190

■ 400.514.220

opt. 25.000 rpm, ø 190 opt. 30.000 rpm

806.104.400.514.190

El pequeño disco de malla aumenta las posibilidades de preparación de cerámicas de alto rendimiento y composites.

El diámetro de 19 mm facilita el acceso a zonas estrechas y resulta ideal para separaciones estrechas en las restauraciones.

El grano fino de diamante permite la preparación en todo tipo de superficies incluyendo el dióxido de zirconio.

Los discos cuentan con una segmentación/perforación y hacen posible una visión constante del campo de trabajo.

806.104.400.514.190

Il piccolo disco a rete offre ulteriori possibilità di rifinire i manufatti in ceramica di alta qualità o compositi.

Il disco con il diametro pari a 19 mm agevola l'accesso alle zone ristrette ed è ideale per le piccole separazioni di elementi protesici.

La granulometria fina permette una rifinitura mirata di tutti i materiali, zirconio compreso.

Il disco presenta una segmentazione/perforazione che garantisce un'ampia e costante visuale sul campo operatorio.

806.104.400.514.190

O pequeno disco de malha alarga as possibilidades de aplicação em cerâmicas de alta performance e compósitos.

O disco diamantado com diâmetro de 19 mm facilita o acesso em áreas com espaço limitado e adequa-se idealmente para a separação delicada em prótese dentária.

O grão diamantado fino permite o trabalho objectivo de todas as superfícies, inclusive de dióxido de zircónio.



Este disco dispõe de um segmento perfurado, que facilita a visualização contínua do campo de trabalho.

■ Anillo amarillo/Anello giallo/Anél amarelo	Superfina/Superfine/Superfino	30 µm	ISO No. 504
■ Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 µm	ISO No. 514
■ Anillo azul/Anello blu/Anél azul	Estándar/Standard/Médio	100 µm	ISO No. 524

Discos diamantados • Dischi diamantati • Discos diamantados

Superflex
806 104 ...

■ ■ 405

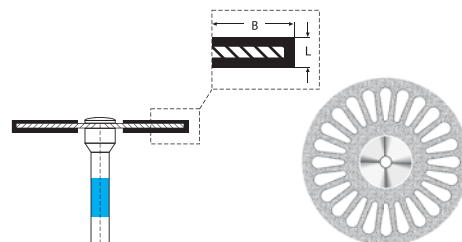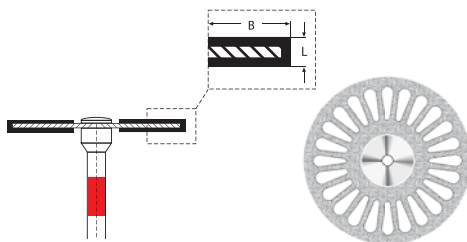

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,15

ø 1/10 mm	220
B mm	completo-piena-completo
L mm	0,25

Shank   

HP **806.104. ...**

■ **405.514.220**

■ **405.524.220**

↻ opt. 25.000 rpm






806.104.505.504.160



806.104.505.504.190

Superflex TURBO
806 104 ...

■ 505

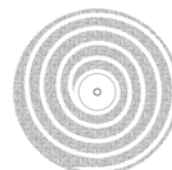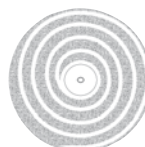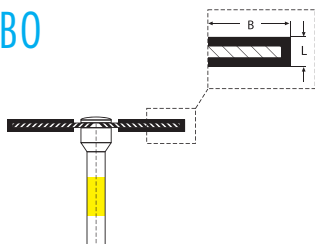

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	160	190	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo	completo-piena-completo	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,12	0,12	0,12

Shank   

HP **TURBO 806.104. ...**

■ **505.504.160**



■ **505.504.190**

■ **505.504.220**

ø 160/190 ↻ opt. 30.000 rpm • ø 220 ↻ opt. 25.000 rpm

Superflex TURBO
806 104 ...

■ 505

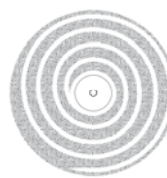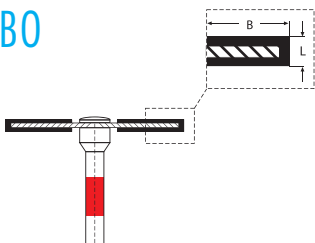

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	190	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,15	0,15

Shank   

HP **TURBO 806.104. ...**

■ **505.514.190**

■ **505.514.220**

ø 190 ↻ opt. 30.000 rpm • ø 220 ↻ opt. 25.000 rpm

■ Anillo amarillo/Anello giallo/Anél amarelo	Superfina/Superfine/Superfino	30 µm	ISO No. 504
■ Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 µm	ISO No. 514
■ Anillo azul/Anello blu/Anél azul	Estándar/Standard/Médio	100 µm	ISO No. 524





Discos diamantados • Dischi diamantati • Discos diamantados



806.104.605.514.220

Superflex
806 104 ...

605

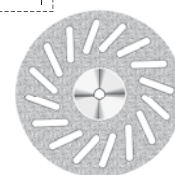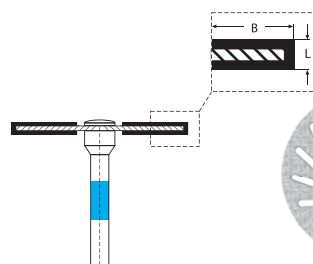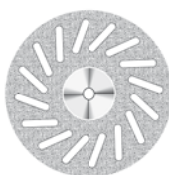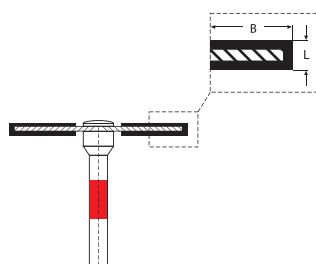

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,15

ø 1/10 mm	220
B mm	completo-piena-completo
L mm	0,25

Shank   

HP 806.104. ...

605.514.220

605.524.220


opt. 25.000 rpm



806.104.705.514.220

Superflex
806 104 ...

705

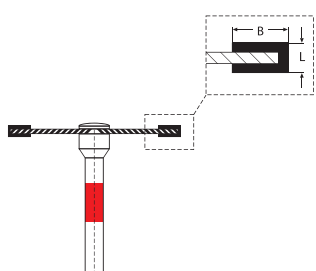

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	190	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	3,0	3,0
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,15	0,15

Shank   

HP 806.104. ...

705.514.190

705.514.220

ø 190 opt. 30.000 rpm • ø 220 opt. 25.000 rpm





	Anillo amarillo/Anello giallo/Anél amarelo	Superfina/Superfine/Superfino	30 µm	ISO No. 504
	Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 µm	ISO No. 514
	Anillo azul/Anello blu/Anél azul	Estándar/Standard/Médio	100 µm	ISO No. 524

Discos diamantados • Dischi diamantati • Discos diamantados

Laboratorio • Laboratorio • Laboratório

Flex

806 104 ...

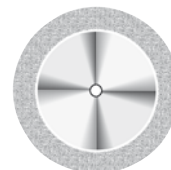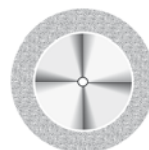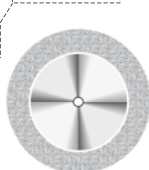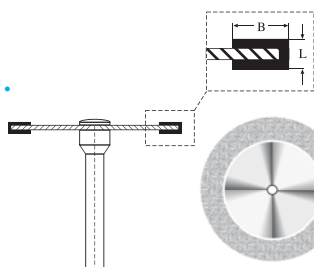
321


Tamaño/Grandezza/Tamanho	190	220	190	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	3,00	3,00	3,00	3,00
Largo/Spessore/ Espessura mm	0,20	0,20	0,30	0,30



Shank

 HP **806.104. ...** ■ **321.514.190** ■ **321.514.220** ■ **321.524.190** ■ **321.524.220**

190 opt. 30.000 rpm • 220 opt. 25.000 rpm

Flex

806 104 ...

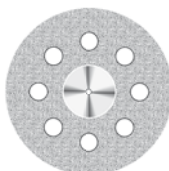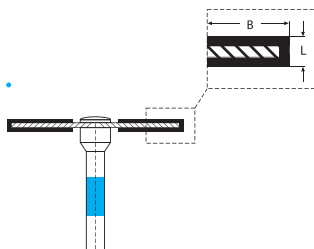
335


Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,30




Shank

 HP **806.104. ...** ■ **335.524.220**

opt. 25.000 rpm

Flex

806 104 ...

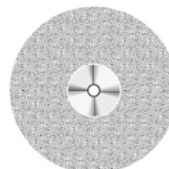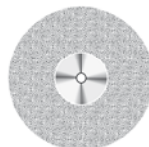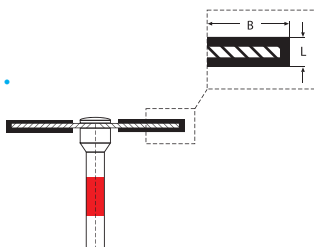
345


Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	190	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,20	0,20

Shank

 HP **806.104. ...** ■ **345.514.190** ■ **345.514.220**


190 opt. 30.000 rpm • 220 opt. 25.000 rpm

■ Anillo amarillo/Anello giallo/Anél amarelo	Superfina/Superfine/Superfino	30 µm	ISO No. 504
■ Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 µm	ISO No. 514
■ Anillo azul/Anello blu/Anél azul	Estándar/Standard/Médio	100 µm	ISO No. 524

Discos diamantados • Dischi diamantati • Discos diamantados

Flex
806 104 ...

■ 345

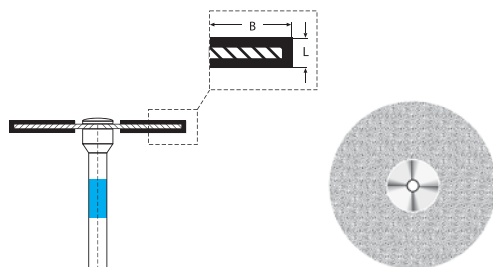

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	220
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,30


Shank   1

HP **806.104. ...** ■ **345.524.220**

⌚ opt. 25.000 rpm

Flex TURBO
806 104 ...

■ 362

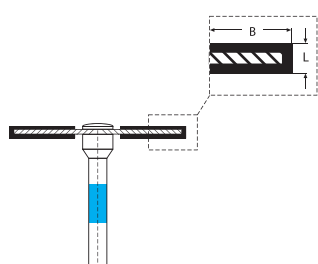

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	080	100
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,30	0,30

Shank   1

HP **TURBO 806.104. ...** ■ **362.524.080** ■ **362.524.100**

⌚ opt. 30.000 rpm



806.104.362.524.100

Disco diamantado Turbo para turbina de laboratorio. Se utiliza para la separación y contorneado de cerámicas.

Disco diamantato Turbo per turbine da laboratorio per separare e tagliare la ceramica.

Disco diamantado Turbo para turbina no laboratório dentário, para separar e cortar materiais cerâmicos.

Flex
806 314 ...

C8-FG



Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	080
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,30

Shank   1

FG **TURBO 806.314.362.524.080** **C8-FG**

⌚ opt. 200.000 rpm



FG

C8-FG

■ Anillo amarillo/Anello giallo/Anél amarelo	Superfina/Superfine/Superfino	30 µm	ISO No. 504
■ Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 µm	ISO No. 514
■ Anillo azul/Anello blu/Anél azul	Estándar/Standard/Médio	100 µm	ISO No. 524

Discos diamantados • Dischi diamantati • Discos diamantados



Disco con borde diamantado sinterizado para muñones individualizados de escayola, para separar arcadas dentales de modelos de escayola.

Diamantatura sinterizzata sui bordi, per il taglio dei monconi sfilabili dei modelli di gesso.

Disco com bordo de diamante sinterizado para gesso, e separação de dentes em modelos de gesso.

Flex
807 104 ...

■ 321 

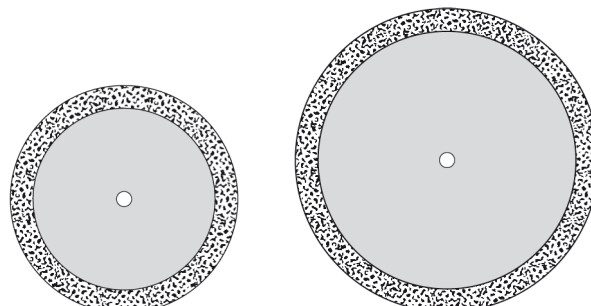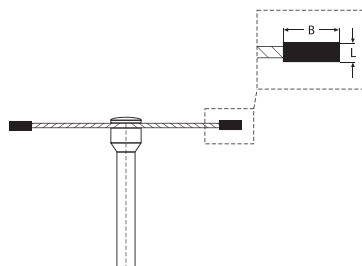

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	300	400
Recubrimiento/Stratificazione/Cobertura	B mm	3,00	3,00
Largo/Spessore/Espessura mm	L mm	0,30	0,30

Shank  REF  1

HP **807.104. ...**

■ **321.524.300**

■ **321.524.400**

opt. 10.000 rpm



806.104.365.524.450

Las perforaciones de la parte activa diamantada del disco aumentan la capacidad de separación. De este modo el disco no se embarra y puede utilizarse sobre yeso húmedo.



La perforazione della parte attiva diamantata del disco aumenta le caratteristiche autopulenti: il disco non si intasa e può essere usato anche nel gesso umido.

A perfuração da área de trabalho diamantada, eleva a capacidade de autolimpeza do disco. Como o disco permanece relativamente limpo é adequado também para trabalhar gesso húmido.

Flex
806 104 ...

■ 365 

Discos diamantados para escayola
Dischi diamantati per gesso
Discos diamantados para gesso

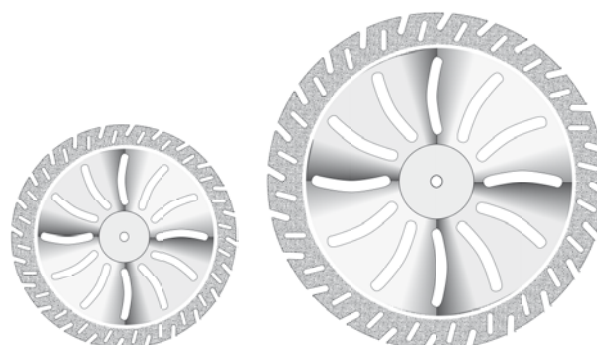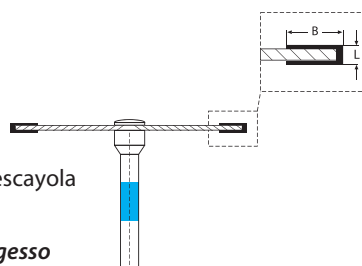

Tamaño/Grandezza/Tamanho	ø 1/10 mm	300	450
Recubrimiento/Stratificazione/Cobertura	B mm	3,0	4,5
Largo/Spessore/Espessura mm	L mm	0,30	0,30

Shank  REF  1

HP **806.104. ...**

■ **365.524.300**

■ **365.524.450**

opt. 20.000 rpm

■ Anillo amarillo/Anello giallo/Anél amarelo	Superfina/Superfine/Superfino	30 µm	ISO No. 504
■ Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 µm	ISO No. 514
■ Anillo azul/Anello blu/Anél azul	Estándar/Standard/Médio	100 µm	ISO No. 524

Discos diamantados • Dischi diamantati • Discos diamantados

Las masas de revestimiento para la cerámica prensada deben de ser sólidas, lo que dificulta los procedimientos de desvastado. El nuevo disco diamantado permite un desvastado rápido sin dañar el material. Gracias a que la superficie del disco ha sido diamantada, es posible trabajar ahorrando tiempo y de una manera fácil. Las ranuras integradas extraen los residuos de la masa de revestimiento, previniendo que el disco se trabe o enganche.

Le masse di rivestimento con ceramica-pessofusa devono avere un'alta stabilità. Questo rende più difficile il processo di rimozione della massa di rivestimento. Questo tipo di processo che fa risparmiare tempo e che riguarda il materiale, viene sostenuto tramite il nuovo disco diamantato. Al fine di ottenere un lavoro veloce e facile, tutta la superficie del disco è provvista di una grana diamantata. La segmentazione rimuove la massa di rivestimento abrasiva dalla fessura e evita in tale modo l'inceppamento del disco nella profondità.



As massas de revestimento para cerâmica injectada devem ter uma alta estabilidade. Isso complica o processo de desinclusão. O novo disco de diamante suporta a desinclusão de maneira rápida e fácil, toda a superfície do disco foi revestida com diamantes. As ranhuras integradas extraem os resíduos do investimento evitando que o disco se bloqueie ou se enganche na profundidade.



Flex
806 104 ...

■ 378 

Discos diamantados para escayola y revestimientos
Dischi diamantati per gesso e massa di rivestimento
Disco diamantado para gesso e revestimentos

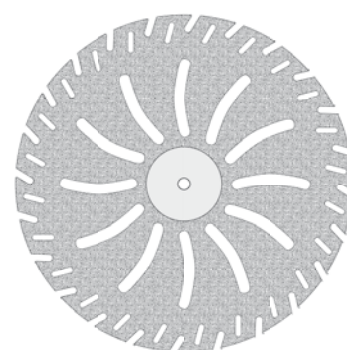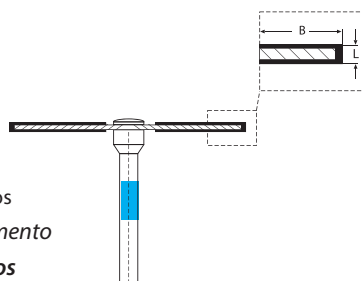

Tamaño/Grandezza/Tamanho	Ø 1/10 mm	450
Recubrimiento/ Stratificazione/Cobertura	B mm	completo-piena-completo
Largo/Spessore/ Espessura mm	L mm	0,30

Shank   

HP 806.104. ...

■ 378.524.450

⌚ opt. 20.000 rpm

Piedra de limpieza para instrumentos diamantados macizos y diamantes sinterizados • Pietra pulente per strumenti diamantati e diamanti sinterizzati • Pedra de limpeza para todos os instrumentos diamantados e diamante sinterizado



REF G9920

Foto con dimensioni ridotte/Representación a tamaño reducido / Imagem diminuída



Aplicación: La piedra de limpieza debe utilizarse húmeda. A tal efecto se sumerge el bloque en agua antes de su utilización, hasta que dejen de ascender burbujas. La humedad del bloque evita la generación de polvo y mejora decisivamente el efecto limpiador.

Utilizzo: La pietra di pulizia deve essere usata bagnata. A tale scopo, prima dell'uso immergere il blocco in acqua finché le bolle d'aria non salgano più alla superficie. L'umidità del blocco impedisce la formazione di polvere e migliora notevolmente l'azione pulente.

Utilização: A pedra de limpeza tem de estar húmida quando for utilizada. Para este fim mergulhe o bloco em água, antes de ser utilizado, até que não haja produção de bolhas. A humidade do bloco evita a formação de pó e melhora consideravelmente o efeito de limpeza.

Un diamante sinterizado requiere de pocos cuidados. Con la piedra de limpieza Ref. G9920 deberá rectificarse el diamante sinterizado de vez en cuando. De este modo obtendrá Ud. una superficie abrasiva siempre limpia y afilada.

Uno strumento diamantato sinterizzato deve essere curato. Con la pietra pulente codice articolo G9920, lo strumento diamantato deve essere pulito regolarmente, ma non troppo spesso. In questo modo si mantiene sempre una superficie pulita e tagliente.

Os instrumentos em Diamante Sinterizado também precisam de manutenção. A limpeza dos instrumentos de Diamante Sinterizado deve ser realizada com a Pedra de Limpeza no. G9920. Eles não necessitam de limpeza com frequência, mas é muito importante para os instrumentos que as suas propriedades de corte, limpeza e trabalho em geral sejam mantidas intactas.